


VACUU·LAN SYSTEM バキューラン・システム

バキューランは、真空ポンプと真空コックをテフロン配管でネットワーク状に接続したシステムです。真空ポンプ1台で、エバポレーターをはじめとする複数の真空機器を同時に減圧可能です。ユニットには、それぞれ逆止弁を内蔵していますので、異なる真空機器相互の干渉がほとんど無く、運用中に他のバルブを開いても他系統の真空度に影響がほとんどありません。設置も簡単ですので、実験台単位の真空ライン構築などに最適です。



VCL 01 A1

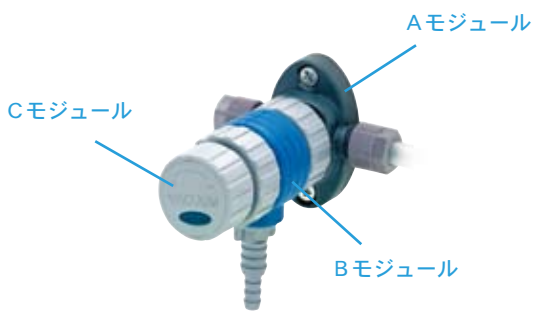

VCL K A1



VCL 02 A1



VCL 10 A1



VCL 11 A1



VCL RKM A1

モデル	VCL 01 A1	VCL K A1	VCL 02 A1	VCL RKM A1	VCL 10 A1	VCL 11 A1
仕様	ニードルバルブ	ボールバルブ	ニードルバルブ +ボールバルブ	ニードルバルブ +ボールバルブ +アナログ真空計	電磁弁 (別途 CVC3000 が必要)	ニードルバルブ +電磁弁 (別途 CVC3000 が必要)
Cat.No.	677106	677155	677107	677175	677108	677109